

▶ GBS-PRE400

Electroestimulador Globus Premium 400



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Dispone de una amplia gama de programas para tratamientos deportivos, fitness y belleza, con programas diferenciados entre hombre y mujer, respetando de este modo las diferencias fisiológicas de cada uno.



Globus presenta dos tecnologías innovadoras destinadas a revolucionar el empleo de la electroestimulación en el campo deportivo y médico:

- Serial sequential stimulation “3S”: la contracción secuencial de los distintos sectores musculares produce una onda de presión profunda en la musculatura interesada, que determina el drenaje de los líquidos intersticiales y favorece el regreso de la sangre venosa al corazón. Es útil también en el ámbito deportivo para el enfriamiento y la recuperación activa post-competición, sobre todo en deportes como jogging, esquí de fondo, ciclismo, triatlón, etc.
- Action now: permite activar la contracción muscular a través de una orden externa activada por un operador; de esta manera es posible asociar la estimulación a la contracción voluntaria del sujeto obteniendo un mayor reclutamiento de fibras musculares y un importante efecto coordinativo.

Deportes especiales: una lista de programas especiales para estimular de manera eficaz y específica las zonas musculares de las actividades deportivas más comunes.

Funciones especiales:

Multi-user: es posible memorizar hasta 10 usuarios diferentes y crear una librería de programas personalizados en función de los objetivos individuales.

Syncrostym: simplemente pulsando un botón se puede aumentar la intensidad de los 4 canales simultáneamente .

Función run-time: esta función permite modificar el tiempo, la frecuencia y la amplitud del impulso durante el tratamiento.

Programable: 10 memorias libres, sólo EMS y TENS.

Función 2+2: permite ejecutar dos programas diferentes contemporáneamente.

Favoritos: permite memorizar hasta 15 programas por usuario.

Last 10: memoriza los últimos 10 programas ejecutados.

Work time: indica el tiempo total de empleo del aparato.

My trainer: visualiza en la pantalla la localización de los electrodos.

Stim lock.
Pantalla gráfica retroiluminada.
Funcionamiento en red y con batería.
Nueva batería de doble potencia.

ESPECIFICACIONES

Canales: 4 canales independientes (8 electrodos)
Frecuencia: 0,3 – 150 Hz
Potencia: 120 mA por canal
Amplitud de impulso: 40 – 450 μ s
Forma onda: Onda cuadrada bifásica simétrica compensada
Alimentación: Batería recargable
Pantalla retroiluminada
Dispositivo Clase II A
Conforme a la directiva 93/42/CEE -2007/47/CEE



USOS

Los electroestimuladores se diseñaron para ser utilizados en ámbitos operativos como:

- Ámbito doméstico;
- Ambulatorios;
- Centros de fisioterapia;
- Rehabilitación en general;
- Tratamientos del dolor;
- Para uso estético y deportivo.


Dispone de una amplia gama de programas para tratamientos deportivos, fitness y belleza, con programas diferenciados entre hombre y mujer, respetando de este modo las diferencias fisiológicas de cada uno.

Ofrece 258 programas:


- 53 Deporte
- 44 Deportes especiales
- 58 Fitness
- 36 Belleza
- 3 Rehabilitación
- 12 Dolor-Tens
- 3 Incontinencia
- 1 Ionoforesis
- 23 Microcorrientes
- 7 Action Now
- 18 Serial Sequential Stimulation "3S"




REHABILITACIÓN

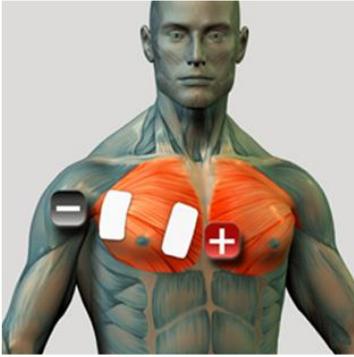


Pectoral

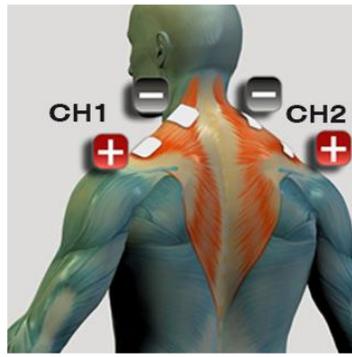


Trapecio

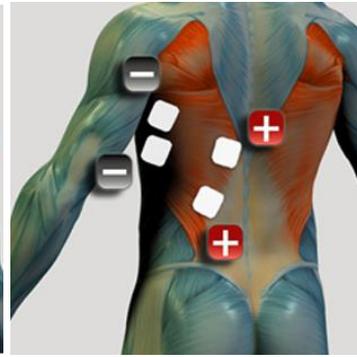


Infraespinoso

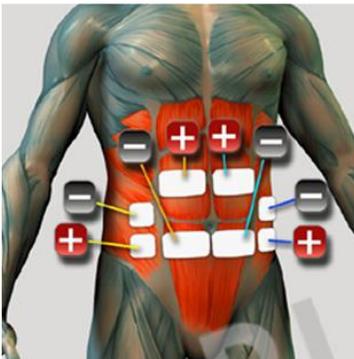


Abdominales

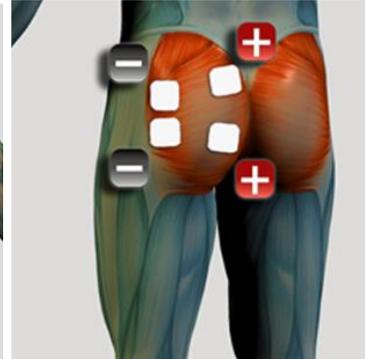


Glúteos

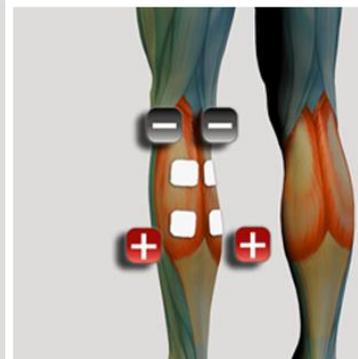


Músculo gastrocnemio

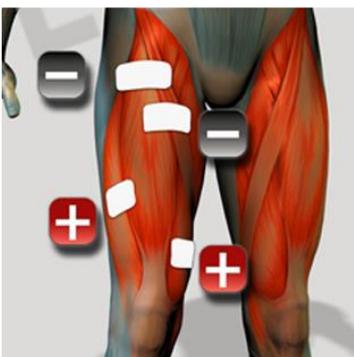

Cuádriceps

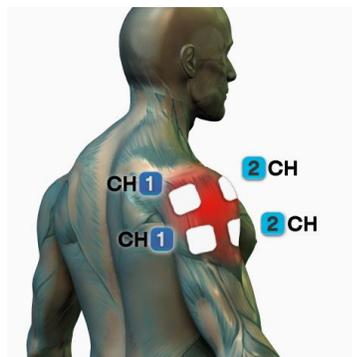

Dolor de hombro

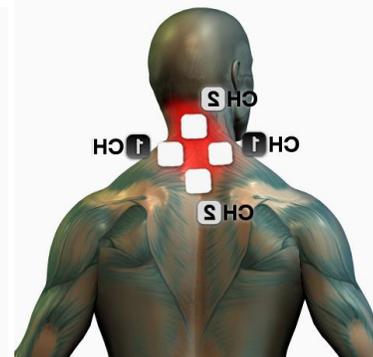

Dolor cervical

PUNTOS DE VENTA

- 1 Bolso.
- 1 Electroestimulador GLOBUS PREMIUM 400.
- 4 Cables para la conexión con los electrodos.
- 2 Cables para las microcorrientes.
- 4 Electrodos autoadhesivos cuadrados.
- 4 Electrodos autoadhesivos rectangulares.
- 1 Cargador de batería.
- 1 Manual operativo.

